

KRYCKKÄPP FLEX, MINDRE

Artikelnummer: 126960, 126965

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Max brukarvikt 100kg. (Max brukarvikt 100kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)

Avsedd användning: Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 100 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



max
85°C
3 min

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Art nr: 126960
grå

Art nr: 126965
blå

Ställbar höjd: 58-80 cm

Vikt: 0,41 kg

Material: Aluminiumrör, PP (överdel), naturgummi (doppskor)

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda



Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

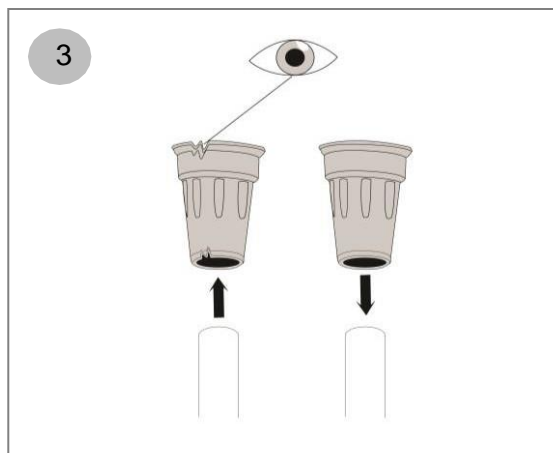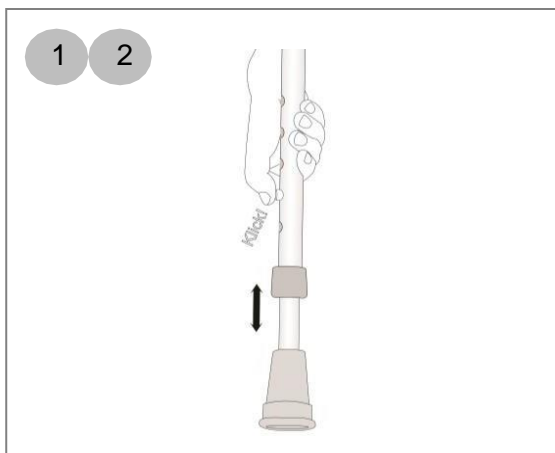

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets
Art. nr 123350, Isdubb kronan
Art. nr 124885, Käpphållare FLEX
Art. nr 124889, Gummifot Stabil

Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko