

KRYCKKÄPP FLEX, BARN

Artikelnummer: 126950, 126955

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Max brukarvikt 50 kg. (Max brukarvikt 50 kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)

Avsedd användning: Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 50 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Art nr: 126950
grå

Art nr: 126955
blå

Ställbar höjd: 46-58 cm

Vikt: 0,31 kg



Material: Aluminiumrör, PP (överdel),
naturgummi (doppskor)

Tillverkad av:

Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se

Användning:

1. Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

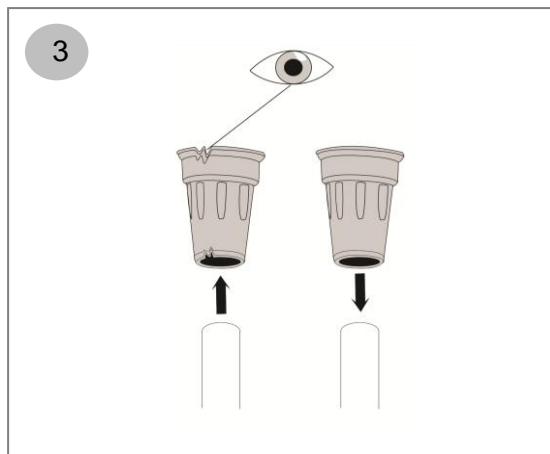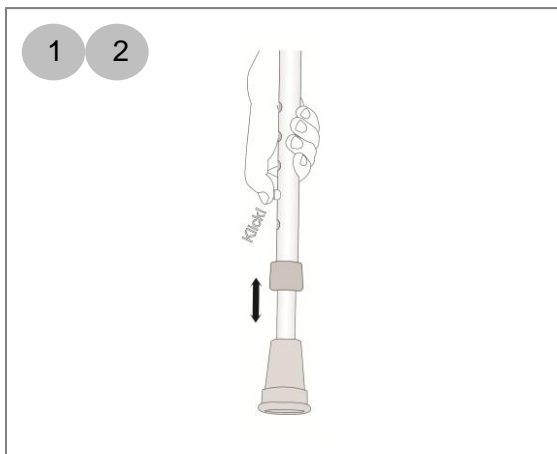

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets
Art. nr 123350, Isdubb kronan
Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar
Art. nr 124885, Käpphållare FLEX
Art. nr 124889, Gummifot Stabil

Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko